

Az Ön új pótfoga. Lépésről lépésre.

Számjon rá időt. A DentiFlex szükség esetén újramelegíthető és alakítható.


A csomagban

A megrendelt üreges koronák, a kiválasztott foghelyek és a mm-ben megadott résméretek alapján, valamint DentiFlex.

Készítsen elő tükröt, hőálló edényt, kanalat, tiszta törölt és vízhőmérőt. Mosson kezet és tisztítsa meg a fogait.


Kezdés előtt olvassa el mindkét oldalt. Csak stabil szomszédos fogakkal a rés mindkét oldalán, egészséges és sérülésmentes ínyénél használja. Ne nyúljon forró vízbe.

1 Puhítsa meg a DentiFlexet

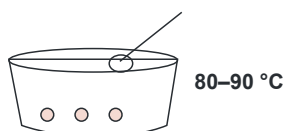


Tegyen kis mennyiséget 80–90 °C-os vízbe. Várja meg, amíg a szemcsék átlátszóvá és alakíthatóvá válnak. Kanállal emelje ki őket.

2 Töltse ki az üreges koronát

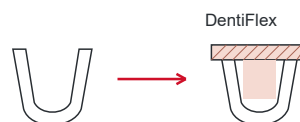


Hagyja az anyagot kellemesen melegre hűlni, majd finoman törölje szárazra. Minden korona üregét töltse ki puha DentiFlexszel. Hátral és oldalt hagyjon anyagot az alakításhoz.

3 Helyezze a fogat a részbe

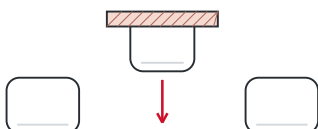


Finoman szárítsa meg a területet. A megtöltött pótfog eleje az ajkak felé, a DentiFlex a nyelv felé nézzen. Forró anyagot soha ne helyezzen be.

4 Igazítsa ujjával

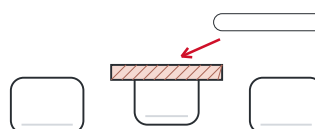


A puha DentiFlexet alakítsa a szomszédos fogak oldalsó körvonalához. A fölösleget még puhán távolítsa el. Ne nyomja az ínyt.

5 Még puhán vegye ki

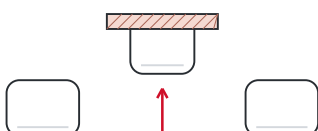

Megkeményedés előtt óvatosan vegye ki a teljes pótlást. Így kis mozgástér marad a későbbi behelyezéshez és kivételhez. Ne hagyja a szájában beszorulni.

6 Hagyja megkeményedni, majd próbálja ki

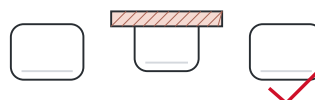

A száján kívül hagyja teljesen kihűlni és megkeményedni. Ezután óvatosan helyezze be, majd vegye ki újra. Nyomás és beszorulás nélkül kell tartania.

Szemléltető ábrák. A sraffozott rész DentiFlex. Nem pontos méret- vagy mennyiségjelölések.

A megfelelő illeszkedésért.

Tartson biztosan, és legyen erőltetés nélkül kivehető.

Minden használat előtt ellenőrizze mindhárom feltételt.

- ✓ A korona és a DentiFlex stabilan összekapcsolódik.
- ✓ Nincs fájdalmas nyomás, és a fogak a megszokott módon érintkeznek.
- ✓ A teljes pótlás erőltetés nélkül behelyezhető és kivehető.

Ha még nem megfelelő az illeszkedés

A száján kívül puhítsa újra a DentiFlexet. A 2. lépés szerint hagyja hűlni, majd alakítsa újra. Az 5. lépést ne hagyja ki.

Laza vagy kiesik

Ne viselje. A száján kívül puhítsa újra, és alakítsa át az oldalsó érintkezést. Mindkét oldalon továbbra is stabil támasz szükséges.

Szoros, nyom vagy zavarja a harapást

Vegye ki. Puha állapotban csökkentse a fölösleges DentiFlexet, hagyja biztonságos hőmérsékletre hűlni, majd illessze újra. Ne harapjon rá erősen.

A korona elválik a DentiFlextől

Ne viselje. Töltse újra az üreges koronát puha DentiFlexszel, és megkeményedés után ellenőrizze a kapcsolatot.

Nem tudja kivenni: Ne használjon erőt, eszközt vagy forró vizet a szájában. Kérjen fogorvosi segítséget.

Minden különálló részhez külön pótlás tartozik. Külön mérje és illessze őket. Ellenőrizze, hogy a kész részek nem ütköznek-e egymásnak, és nem változtatják-e meg a harapást.

Tisztítás és tárolás

Éjszakára vegye ki. Naponta tisztítsa langyos vízzel és puha kefével. Hagyja megszáradni, majd szárazon, napfénytől és 40 °C feletti hőtől védve tárolja.

Mikor nem használható a Denticor?

Ne használja friss seben, fájdalmas, gyulladt, duzzadt vagy vérző ínyen, mozgó szomszédos fogak mellett, illetve ha bármelyik oldalon hiányzik a fogtámasz. A mellékelt útmutató kizáró okként említi az epilepsziát, az asztmát, a súlyos allergiát, az ismert anyagallergiát és más súlyos betegségeket is. Bizonytalanság esetén először kérdezze meg fogorvosát.

Kizárólag 18 éven felülieknek. Az apró részeket tartsa gyermekektől távol, és ne nyelje le. Laza vagy sérült részeket ne viseljen.

Kizárólag ideiglenes, esztétikai célú pótlás. Nem helyettesíti a fogorvosi kezelést és a teljes rágófunkciót.

Kérdés az illesztésről? info@denticor.hu